




LIQUIBANDFIX8™
Laparoscopic hernia mesh fixation device

Together we can
minimize pain.

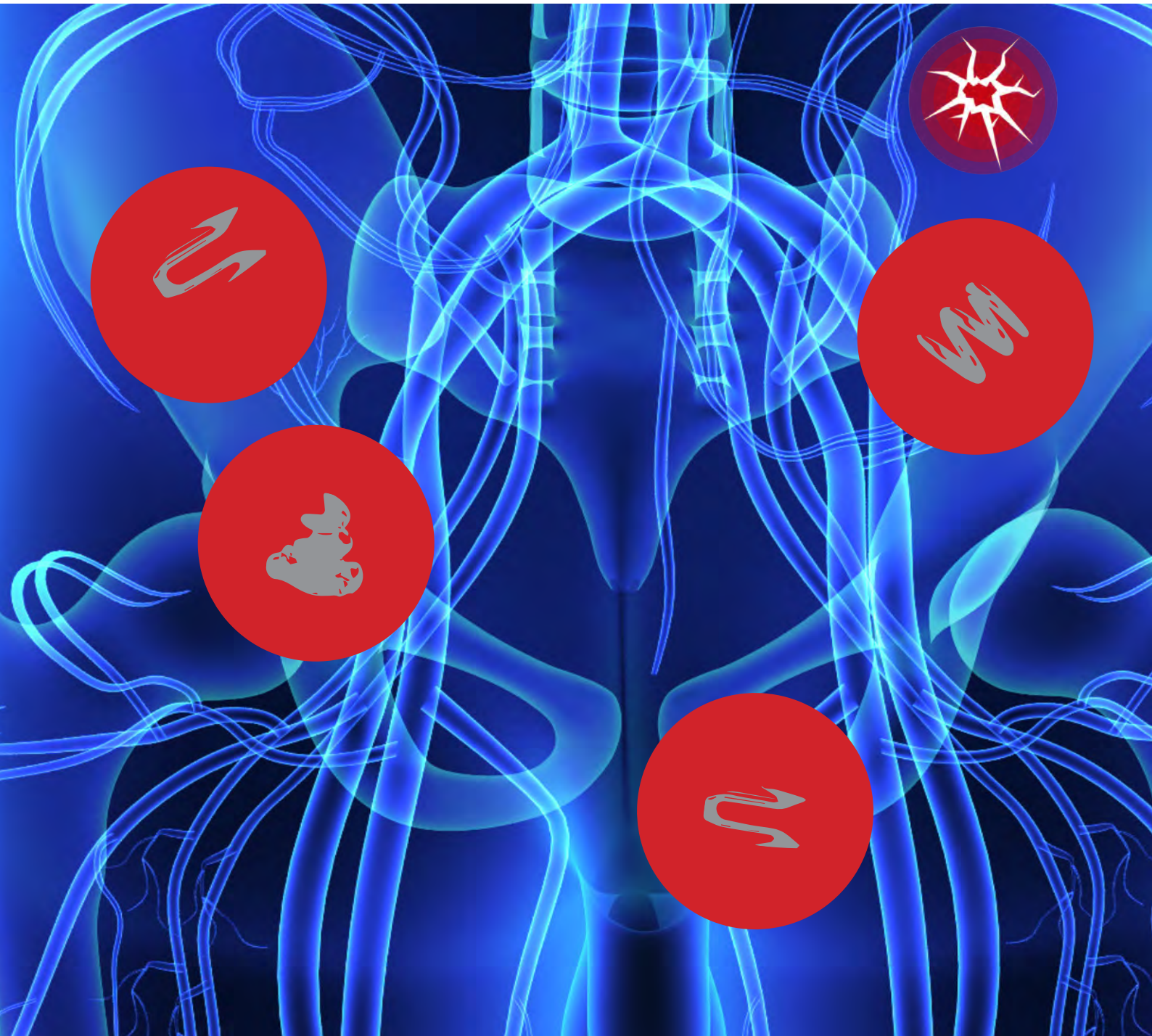

**Breaking the spiral of post-operative pain
in hernia mesh fixation**

LIQUIBANDFIX8™


Laparoscopic hernia mesh fixation device

Designed for atraumatic hernia mesh fixation.


Innovative liquid anchors result in strong hernia mesh fixation reducing the risk of some common post operative complications such as:

- **Neuralgia¹**
- **Paresthesia¹**
- **Mechanical Tissue Trauma¹**

LIQUIBANDFIX8™ device was shown to have a low incidence of post-operative pain in hernia mesh fixation².

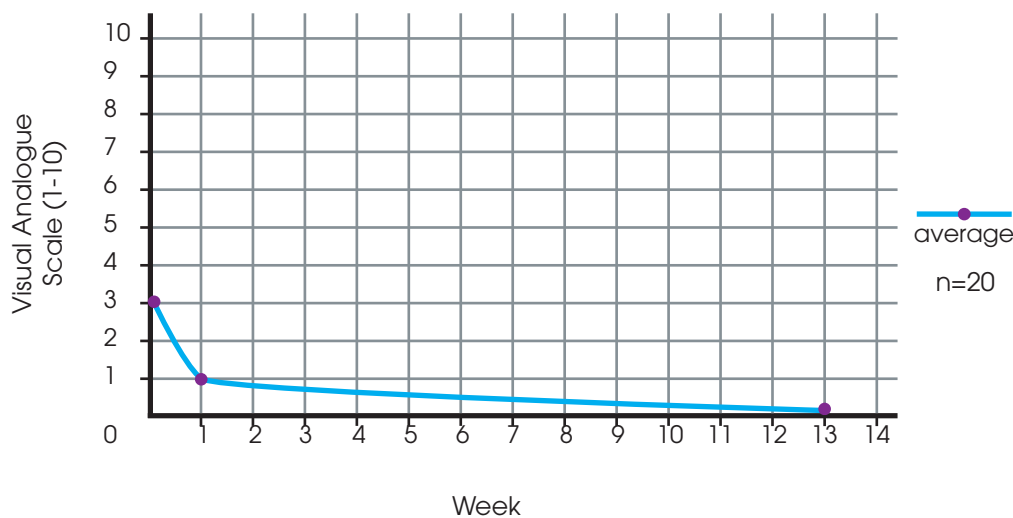

Incidence of Post-Operative Pain³

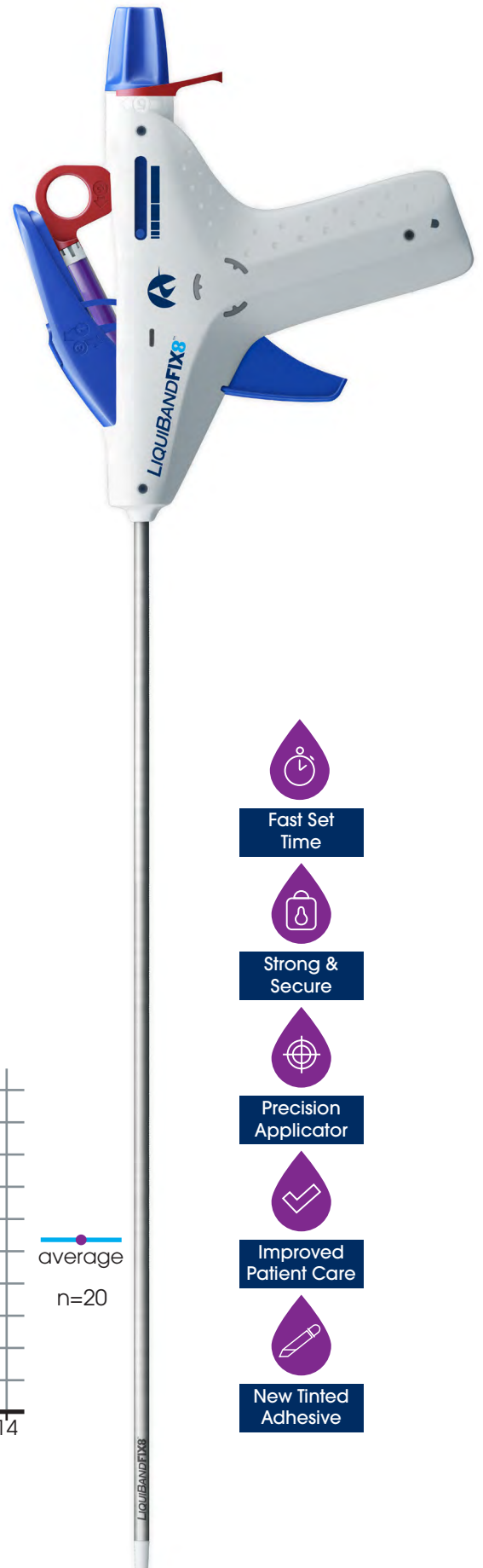

Fast Set Time



Strong & Secure



Precision Applicator




Improved Patient Care



New Tinted Adhesive

Safe and Secure

LIQUIBANDFIX8™ has proven to have higher shear strength as compared to an advanced tacking device.

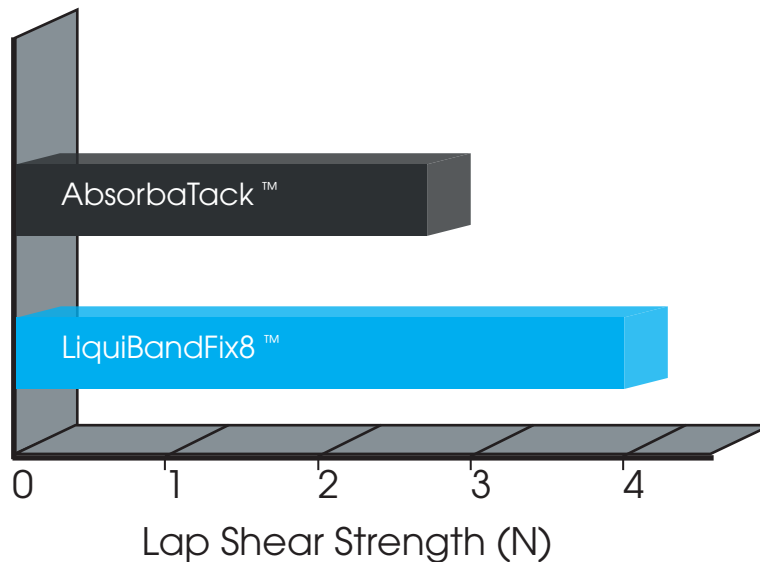

Precise and Ergonomic

Innovative design offers easy handling and controlled delivery of liquid anchors.



Non-Sticking /
Atraumatic Tip



Quantity
Indicator



Controlled
Delivery Trigger



Ergonomic
Design

Advanced design
of **LIQUIBANDFIX8™**
offers accurate fixation
and was designed for
patient safety.



Strong and Secure Mesh Fixation



Precise and Controlled Application



Fixation at Multiple Angles

VORBEREITUNGSSCHRITTE

Product Code: FX001



Schritt 1:

Das Gerät in einem Winkel von 45° mit der Spitze gegen unten halten. Um die Ampulle vollkommen zu zerdrücken, den blauen Griff oben bis zum Anschlag in Richtung des Pfeils Nr. 1 anheben. **Nachdem die Ampulle zerdrückt ist, unbedingt 5 Sekunden warten.**



Schritt 2:

Das Gerät weiter in einem Winkel von 45° mit der Spitze nach unten halten. **Den roten Konduktor ganz langsam, d.h. innerhalb von 20 Sekunden nach hinten ziehen.** Dieses langsame Übertragen des Gewebeklebers in die Abgabekammer ist Voraussetzung für das optimale Funktionieren. Danach löst sich der Konduktor automatisch und kann vollständig entfernt und entsorgt werden.



Schritt 3:

Den blauen Griff oben anschliessend in Richtung des Pfeils Nr. 3 nach unten drücken, bis dieser vollständig im weissen Gehäuse einrastet.



Schritt 4 :

Den roten Verschluss teil hinten zwischen blauem Drehknopf und weissem Gehäuse entfernen und entsorgen.



Schritt 5:

Sich vergewissern, dass die distale, weisse Spitze des Instruments 45° gegen unten in einem Plastikbehälter positioniert ist. Den blauen Drehknopf hinten am Gerät im Uhrzeigersinn (Pfeil Nr. 5) drehen, bis der Auslöser automatisch freigegeben wird.



Step 6:

Die distale, weisse Spitze weiterhin im Plastikbehälter halten. Den Auslösegriff 2-3 Mal drücken bis der Gewebekleber vollkommen von der Spitze austritt. Das Gerät ist nun einsatzbereit.

References:

1: On AMS data file

2: A novel glue device for fixation of mesh and peritoneal closure during laparoscopic inguinal hernia repair: short and medium-term results; Dauser B, Szyszkowitz A, Seitingner G, Fortelny RH, Herbst F. 2016

3: TAPP surgery with mesh fixation and peritoneal closure using n-butyl-2-cyanoacrylate (LiquiBand FIX8TM)—initial experience; Mittermair R, Jenic G, Kolenik R, Sorre C. 2015

YOUR PARTNER IN SURGERY SINCE 2003

INNOVATION AND QUALITY AT THE SERVICE OF SURGERY

+41 (0)22 743 24 10 • contact@reymedical.ch • www.reymedical.ch

The best technology available on the market, at the best price, at the right time